


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> <div>プレイン容器</div>  <div> <div>容量 9mL</div> <div>内容 分離剤</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 1年</div> </div> <div>適用検査項目</div> <div>           生化学的検査<br/>           薬物検査<br/>           免疫学的検査<br/>           ウイルス感染症検査<br/>           内分泌学的検査         </div>                                                  | <div>6</div> <div>アンモニア用</div>  <div> <div>採取量 血液1mL正確に</div> <div>内容 除蛋白液<br/>(タングステン酸ナトリウム)</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 6ヶ月</div> <div>適用検査項目<br/>血中アンモニア</div> <div>           ・採血後、直ちに正確に1.0mLを専用容器に加え、充分攪拌後、速やかに遠心分離し、その上清をご提出ください。<br/>           ・上清分注後、凍結保存願います         </div> </div>            | <div>13</div> <div>EDTA-2Na入</div>  <div> <div>採取量 血液7mL・5mL</div> <div>内容 EDTA-2Na</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 1年</div> <div>適用検査項目</div> <div>           ACTH<br/>           レニン活性<br/>           カテコールアミン<br/>           クロスマッチ<br/>           BNP<br/>           など         </div> </div> |
| <div>2</div> <div>滅菌スピッツ</div>  <div> <div>容量 10mL</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 1年</div> <div>適用検査項目</div> <div>           尿一般検査<br/>           髄液・穿刺液検査<br/>           関節液検査<br/>           精液検査<br/>           ・新鮮尿を冷蔵保存にてご提出ください。<br/>           ・尿一般検査については中間尿を採取してください。         </div> </div>                 | <div>9</div> <div>便ヘモグロビン</div>  <div> <div>採取量 適当量</div> <div>内容 緩衝液</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 表示通り</div> <div>適用検査項目</div> <div>           便ヘモグロビン<br/>           便Hb・Tf<br/>           ・容器中の緩衝液は捨てないでください。<br/>           ・採便時の食事制限はありません。<br/>           ・採取方法は本文P6を参照願います。         </div> </div> | <div>16</div> <div>EDTA-2Na+ アプロチニン</div>  <div> <div>採取量 血液 3mL</div> <div>内容 EDTA-2Na<br/>アプロチニン</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 表示通り</div> <div>適用検査項目</div> <div>           HANP<br/>           グルカゴン<br/>           PTHrP         </div> </div>                                             |
| <div>4</div> <div>乳酸・ピルビン酸</div>  <div> <div>採取量 血液 1mL</div> <div>内容 1N 過塩素酸 1mL</div> <div>貯蔵方法 冷蔵</div> <div>有効期間 3ヶ月</div> <div>適用検査項目</div> <div>           乳酸<br/>           ピルビン酸<br/>           ・氷冷1.0N過塩素酸1.0mLに血液1.0mLを入れよく混和し除蛋白後15～60分静置し、遠心分離を行ってください。上清分離後凍結。         </div> </div>                       | <div>10</div> <div>便検査用</div>  <div> <div>採取量 便 1g</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 1年</div> <div>適用検査項目</div> <div>           便虫卵(集卵・塗抹)<br/>           便培養<br/>           病原大腸菌 O-157<br/>           ノロウイルス抗原<br/>           など         </div> </div>                                                     | <div>17</div> <div>血糖用</div>  <div> <div>採取量 血液 1mL</div> <div>内容 フッ化Na、ヘパリンNa<br/>EDTA-2Na</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 1年</div> <div>適用検査項目</div> <div>           血糖<br/>           ヘモグロビン A1c<br/>           ・採血後、よく混和させ冷蔵保存願います         </div> </div>                                    |
| <div>5</div> <div>血球用</div>  <div> <div>採取量 血液 2mL</div> <div>内容 EDTA-2K</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 1年</div> <div>適用検査項目</div> <div>           末梢血一般検査<br/>           血液像(白血球分類)<br/>           ABO式血液型<br/>           Rh式(D)血液型<br/>           直接クームス試験<br/>           ・溶血・凝固及び凍結検体は測定不可         </div> </div> | <div>11</div> <div>尿中 FDP</div>  <div> <div>採取量 尿 1mL</div> <div>内容 トロンビン様酵素</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 1年6ヶ月</div> <div>適用検査項目</div> <div>           尿中 FDP<br/>           ・抗プラスミン剤とトロンビン入り容器に新鮮尿1.0mL採取し、容器のまゝご提出ください。         </div> </div>                                                        | <div>19</div> <div>ヘパリン</div>  <div> <div>採取量 血液5mL・10mL</div> <div>内容 ヘパリン Na</div> <div>貯蔵方法 室温</div> <div>有効期間 1年</div> <div>適用検査項目</div> <div>           細胞性免疫検査<br/>           ・リンパ球が少ない患者は多めに採血願います。<br/>           ・検体採取後は、当日中にご提出ください。         </div> </div>                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23</b> <b>3.2%クエン酸 Na 入り</b><br> <p>採取量 1.8mL・4.5mL<br/>         内容 3.2%クエン酸<br/>         ナトリウム<br/>         貯蔵方法 室温<br/>         有効期間 1年<br/>         適用検査項目<br/>         プロトロンビン時間<br/>         APTT<br/>         AT-Ⅲ、FDP<br/>         フィブリノーゲン<br/>         ヘパラスチンテスト<br/>         D-D ダイマー<br/>         凝固因子検査</p> |  | <b>30</b> <b>シードスワブ</b><br> <p>1号      2号      EZ</p> <p>内容 キャリーブリア改良培地・<br/>         変法アミース培地<br/>         貯蔵方法 室温<br/>         有効期間 表示通り</p> <p>適用検査項目<br/>         一般細菌培養同定<br/>         抗酸菌検査<br/>         ・採取後は冷蔵保存願います<br/>         (目的菌が淋菌、髄膜炎菌の時は<br/>         常温保存)</p> | <b>35</b> <b>遮光用尿容器</b><br> <p>容量 10mL・100mL<br/>         貯蔵方法 室温<br/>         有効期間 無期限</p> <p>適用検査項目<br/>         17-KS7 分画<br/>         尿中 5SCD<br/>         尿コプロボルフィリン</p> |
| <b>27</b> <b>β-TG、PF4</b><br> <p>採取量 2.7mL<br/>         内容 クエン酸Na、テオフィリン、クエン酸、<br/>         フラスコ、シリカゲル<br/>         貯蔵方法 遮光・冷蔵<br/>         有効期間 1年<br/>         適用検査項目<br/>         血小板第4因子<br/>         β-TG</p>                                                                                                        |  | <b>31</b> <b>赤 沈 用</b><br> <p>採取量 血液 1.6mL<br/>         内容 3.8%クエン酸ナトリウム<br/>         貯蔵方法 室温<br/>         有効期間 1年<br/>         適用検査項目<br/>         血沈<br/>         ・採血後、当日中にご提出<br/>         願います。<br/>         ・血液1.6mLを採取し、<br/>         転倒混和後、冷蔵保存</p>                      | <b>36</b> <b>蛍光抗体法専用スライド</b><br> <p>貯蔵方法 室温<br/>         有効期間 1年</p> <p>適用検査項目<br/>         ・単純ヘルペス特異抗原 FA<br/>         ・水痘ウイルス抗原<br/>         ・採取方法はP81参照願います。</p>           |
| <b>28</b> <b>カルチャーボトル</b><br> <p>採取量 血液 5～10mL<br/>         貯蔵方法 室温<br/>         有効期間 表示通り<br/>         適用検査項目<br/>         好気性菌培養同定<br/>         真菌培養同定<br/>         嫌気性菌培養同定</p>                                                                                                                                       |  | <b>32</b> <b>サコマノ液入り喀痰容器</b><br> <p>内容 サコマノ氏液<br/>         (DTT 液)<br/>         貯蔵方法 室温<br/>         有効期間 1年<br/>         適用検査項目<br/>         肺癌集細胞法</p>                                                                                                                       | <b>39</b> <b>肺癌 3 日連続 (柴田氏法) 用</b><br> <p>内容 55%エタノール<br/>         貯蔵方法 室温<br/>         有効期間 6ヶ月</p> <p>適用検査項目<br/>         肺癌 3 日連続法</p>                                   |
| <b>29</b> <b>嫌気ポーター</b><br> <p>内容 保存培地 CO<sub>2</sub><br/>         貯蔵方法 冷蔵<br/>         有効期間 1年<br/>         適用検査項目<br/>         嫌気性培養</p>                                                                                                                                                                               |  | <b>33</b> <b>ウイルス分離用</b><br> <p>内容 ウイルス専用保存液入り<br/>         貯蔵方法 冷蔵<br/>         有効期間 6ヶ月<br/>         適用検査項目<br/>         ウイルス分離・同定</p>                                                                                                                                       | <b>40</b> <b>喀痰容器</b><br> <p>貯蔵方法 室温<br/>         有効期間 無期限</p> <p>適用検査項目<br/>         結核菌 DNA-PCR<br/>         MACDNA-PCR<br/>         培養同定 喀痰</p>                          |

|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 41                                                                                  | 病理組織容器           | 50                                                                                  | ヘリコバクター培養用      | 63                                                                                    | 血漿用ウイルス遺伝子検査用     |
|    |                  |    |                 |    |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
| 43                                                                                  | NK 細胞活性化用        | 53                                                                                  | 標本用スライドガラス      | 64                                                                                    | 尿中4型コラーゲン専用容器     |
|   |                  |    |                 |   |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
| 48                                                                                  | 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ | 55                                                                                  | 尿中 NMP22        | 65                                                                                    | 糞便中ヘリコバクターピロリ抗原検査 |
|  |                  |  |                 |  |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
| 49                                                                                  | 尿ミオグロビン用         | 59                                                                                  | ヒトパピローマウイルス DNA | 66                                                                                    | ウイルス遺伝子検査用        |
|  |                  |  |                 |  |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |
|                                                                                     |                  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                   |

|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 68                                                                                  | ACD-A 液 (PA・IgG 用) | 101                                                                                 | PCR 専用容器：ぬぐい液         | 105                                                                                   | Lamp 専用容器      |
|    |                    |    |                       |    |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
| 69                                                                                  | EDTA-2K 入り         | 102                                                                                 | PCR 専用容器：尿            | 106                                                                                   | Lamp 専用容器      |
|   |                    |   |                       |   |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
| 70                                                                                  | 細胞診 (婦人科 C-R 法)    | 103                                                                                 | PCR 専用容器：うがい液         | 107                                                                                   | T-SPOT・TB 専用容器 |
|  |                    |  |                       |  |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
| 71                                                                                  | 保存液入り マルク用         | 104                                                                                 | HIV1,2 抗体 ウェスタンブロット専用 | 108                                                                                   | アルミニウム専用容器     |
|  |                    |  |                       |  |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |
|                                                                                     |                    |                                                                                     |                       |                                                                                       |                |

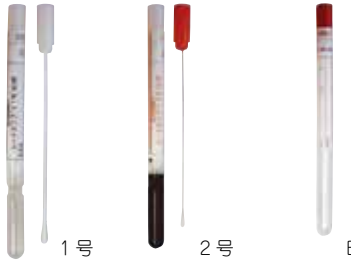

|                                                                                     |                   |                                                                                                    |                                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 110                                                                                 | ヒト癌胎児性フィブロネクチン    |                                                                                                    | 114                                                                               | 百日咳菌核酸検出 |
|    |                   | 内容 抽出液                                                                                             |  |          |
|                                                                                     |                   | 貯蔵方法 室温                                                                                            | 後鼻腔ぬぐい液                                                                           |          |
|                                                                                     |                   | 有効期間 1年                                                                                            | 貯蔵方法 室温                                                                           |          |
|                                                                                     |                   | 適用検査項目<br>ヒト癌胎児性<br>フィブロネクチン                                                                       | 有効期間 3年                                                                           |          |
|                                                                                     |                   |                                                                                                    | 適用検査項目<br>百日咳菌核酸検出 /<br>LAMP                                                      |          |
| 111                                                                                 | 細胞性免疫骨髓液容器        |                                                                                                    |                                                                                   |          |
|   |                   | 容器容量 7mL                                                                                           |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 内容 10% FBS 加<br>RPMI1640<br>ヘパリン Na                                                                |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 貯蔵方法 到着後凍結<br>ドライアイス不可                                                                             |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 有効期間 製造後冷凍1年                                                                                       |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 適用検査項目<br>細胞性免疫検査<br>(骨髓液)                                                                         |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | ・使用時に解凍していただき、濁りや溶液が変色している場合は使用しないでください。<br>検体採取後は冷蔵でご提出ください。                                      |                                                                                   |          |
| 112                                                                                 | 細胞性免疫リンパ節その他容器    |                                                                                                    |                                                                                   |          |
|  |                   | 容器容量 15mL                                                                                          |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 内容 10% FBS 加<br>RPMI1640                                                                           |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 貯蔵方法 到着後凍結<br>ドライアイス不可                                                                             |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 有効期間 製造後1年                                                                                         |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 適用検査項目<br>細胞性免疫検査                                                                                  |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | ・使用時に解凍していただき、濁りや溶液が変色している場合は使用しないでください。<br>検体採取後は冷蔵でご提出ください。                                      |                                                                                   |          |
| 113                                                                                 | エンドトキシン・β-D- グルカン |                                                                                                    |                                                                                   |          |
|  |                   | 採取量 血液 3mL                                                                                         |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 内容 ノボヘパリン15IU                                                                                      |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 貯蔵方法 室温                                                                                            |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 有効期間 2年                                                                                            |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | 適用検査項目<br>エンドトキシン<br>β-D-グルカン                                                                      |                                                                                   |          |
|                                                                                     |                   | ・キャップを取らずに血液3mLを無菌的に採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち、そのまま冷蔵保存してください。<br>・他項目との重複依頼は避けてください。<br>・透析液の測定はできません。 |                                                                                   |          |